

## Instruction for Use


### ReliOn® Digital Temple Thermometer

Thank you for purchasing the ReliOn® Digital Temple Thermometer. The thermometer enables accurate temperature measurements in approximately 6-10 seconds, using simple steps.

#### Table of Contents:

#### QUICK START

- Section 1 About Body Temperature Measurement
- Section 2 Installing and Replacing the Batteries
- Section 3 Guidelines for Use
- Section 4 Care and Cleaning
- Section 5 Troubleshooting and Special Indications
- Section 6 Technical Information
- Section 7 Warranty and Service Information

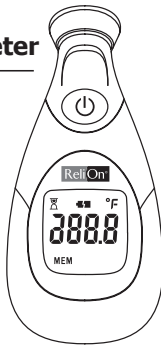

**IMPORTANT! Read user manual before using the thermometer.**

#### QUICK START

1. Install batteries into the thermometer. Make sure the polarity is correct (see section 2).
2. Press and release the blue ON/OFF button. Unit will beep once. Wait until it beeps again twice and °F appears in the display (see section 3).
3. Place and hold the thermometer probe firmly to the skin at the temple and wait several seconds for the device to beep once more (see section 3).
4. Read the temperature on the display (see section 3).

#### General Warnings:


1. Measurement body location is the temple, in proximity to the temporal artery, between the eye socket and the hairline.
2. Do not place the thermometer on scarred tissue compromised by skin disorder, open sores or abrasions and patients in trauma.
3. Consult your physician when using drug therapies that may raise the local skin temperature in the forehead; this may lead to incorrect reading.
4. Do not place the thermometer on skin exposed to direct sunlight, fireplace heat, air conditioner flow and cold/warm compress therapies.
5. Keep the thermometer out of reach of unsupervised children.
6. Do not drop the thermometer or expose to heavy shock. The unit is not shock proof.

7. Do not immerse the thermometer in water or any other liquid. The unit is not water proof.
8. In order to ensure accurate measurement, please wait at least two minutes between consecutive measurements for the unit to readjust to room temperature.
9. The device is not suitable for use in presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.
10. Do not store the unit in direct sunlight, at a high temperature, in high humidity or dust. Performance of the unit may be degraded.
11. Stop using the thermometer if it operates erratically or if display malfunctions.
12. Clean the thermometer probe before storing. (See section 4, Care & Cleaning)
13. Do not attempt to disassemble the unit except to replace the batteries.
14. If the thermometer has been stored at below-freezing temperatures, allow the unit to warm naturally to room temperature before using.
15. Performance of the device may be degraded if operated or stored outside stated temperatures and humidity ranges or if the patient's temperature is below the ambient (room) temperature.

#### 1. About Body Temperature Measurement:

How does the thermometer work?

Your ReliOn® Digital Temple Thermometer accurately measures body heat using Rapid, Accurate, State of the Art Technology. Sensor **A** rapidly tracks the heat flow generated from blood vessels **B** to the skins surface **C** and converts measurement to body temperature.

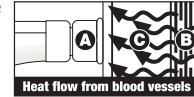

#### Information about Body Temperature

##### What is "normal" body temperature?

"Normal" body temperature varies from person to person and changes according to time of day and body location. Hot or cold baths, physical exercise, smoking and drinking, hot or cold drinks may change body temperature by one degree or more.

The following table shows the Temperature ranges:

	What is fever?	Average normal temperature ranges
<b>Forehead</b>	Over 100.0°F / 37.8°C	97.0°F - 100.0°F / 36.1°C - 37.8°C
<b>Rectal*</b>	Over 100.4°F / 38°C	97.3°F - 100.4°F / 36.3°C - 38°C
<b>Oral (mouth)*</b>	Over 100.0°F / 37.8°C	97.0°F - 100.0°F / 36.1°C - 37.8°C
<b>Axilla (armpit)*</b>	Over 99.0°F / 37.2°C	95.4°F - 99.0°F / 35.2°C - 37.2°C

\* Fever definitions according to the American Medical Association

1

2

The thermometer is designed to measure with precision the temperature in the forehead, in proximity to the temporal artery, between the eye socket and the hairline. It is important to know that the thermal characteristics of each measurement body location – temporal, axillary, oral or rectal - are unique. The variance in temperature measurement in different body locations is due to the human body and not the thermometer. The thermometer readings are equivalent to oral measurements.

#### IMPORTANT:

- " It is recommended that you measure the body temperature of each individual when healthy to establish a "normal" temperature.
- " Due to the unique body physiology of each person, it is recommended that you take a persons temperature at the same temple location in comparative measurements.

#### 2. Installing and Replacing the Batteries:

The thermometer uses 2 standard AAA 1.5v batteries. To install/replace :

1. Remove the battery cover by sliding it out of its housing.
2. Firmly attach the batteries to their place, make sure polarity is correct.
3. Slide the battery cover back into place.

**IMPORTANT:** It is recommended to remove the batteries from the thermometer when it is not used for a long period.

**WARNING:** Do not dispose of batteries in fire, recharge, put in backwards, disassemble, mix with used or other battery types – they may explode or leak and cause injury. Waste batteries should be deposited in batteries recycling trash only.

#### 3. Guidelines for Use:


- a. Use this thermometer on clean dry skin. Wipe away any perspiration prior to use.
- b. Make sure that the thermometer and the patient do not move while measurement is in progress.
- c. Correct placing and good contact with the body ensure reliable readings.
- d. Do not try to take a measurement until the two beeps are heard.

#### Setting the Operating Scale °F or °C

The device setting is by default Fahrenheit (°F), however at any time, the scale may be changed. To change the scale to Celsius (°C), or back to °F, by pressing the Power button within the first 3 seconds of turning on the unit.

#### Operating the Thermometer

1. Press and release the blue Power button. You will hear one beep. All segments will be displayed.
2. The result of the last temperature measurement will be displayed for 2 seconds\*.
3. Wait for the hourglass icon to disappear, then two beeps will be heard to indicate that the thermometer is now "ready to measure".
4. Take a measurement according to the following guidelines:

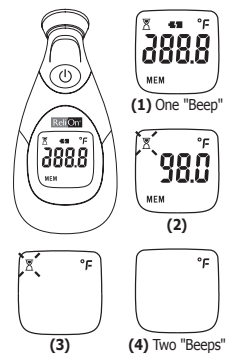

#### Taking Temperature:

- a. Make sure temporal area is dry and clean.
- b. Remove hair from the temporal area.
- c. Place the thermometer probe in the center of the temporal area between the eye socket and the hairline. Gently press it against the temple to ensure good contact with the skin is maintained.
- d. Hold the device still and keep the patient still for the duration of the measurement.
- e. As soon as the thermometer is in place, the measurement starts automatically. A running circle will appear indicating that measurement is progressing successfully.
- f. A temperature reading will be displayed within 6 – 10 seconds. One long beep will be heard to indicate that measurement is complete.
- g. Wait for the hourglass icon to disappear, then two beeps will be heard to indicate that the thermometer is now "ready for measurement again".
- h. Press and release the blue Power button to turn the thermometer off.
- i. If you want to get the maximum accuracy, please wait two minutes after turning the thermometer off and then begin again at Step 1 of "Operating the Thermometer".



(f) One long "Beep"



(g) Two "Beeps"



(h)


3

4

### Memory Mode


#### Recalling Memory:

- If the power is on, turn off the power first.
- Press and hold the Power button for about 3 seconds until the last recorded Temperature is displayed.
- Pressing the Power button repeatedly will take you to each recorded temperature in the memory.
- After you release the Power button the unit will return to all segments display.
- Wait for the hourglass icon to disappear, then two beeps will be heard to indicate that the thermometer is now "ready to measure".

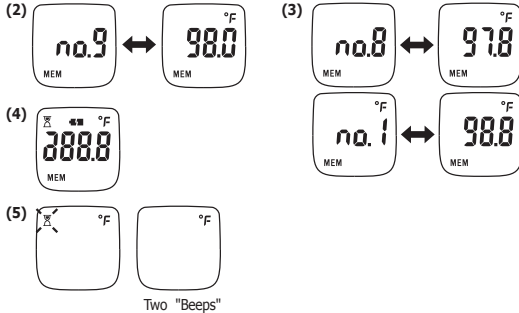

#### Deleting Memories:

- Repeat the first two steps of "Recalling Memories".
- Press and hold the Power button for three seconds until "dEL" is displayed.
- (a) To delete:  
Press and release the Power button to erase all of the records in the unit. A beep is heard.
- (b) To cancel:  
DO NOT press the Power button for 10 seconds, the unit will return to all segments display. Wait for the hourglass icon to disappear, then two beeps will be heard to indicate that the thermometer is now "ready to measure".

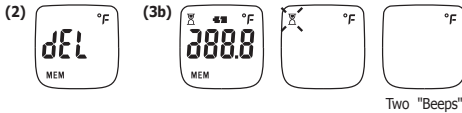

### IMPORTANT:

- Clean the thermometer after each use (see section 4).
- In order to ensure accurate measurement, please wait at least two minutes between consecutive measurements for the unit to readjust to room temperature.**
- If the thermometer is not turned off, it will shut off automatically within 1 minute.
- Once the thermometer is "ready to measure", it will shut off automatically after 1 minute if it has not made good contact or maintained good contact with the patient's skin.
- Because the thermometer is a very sensitive device, the patient and thermometer should be in the same room temperature (approx. 60.8~104.0° F) for at least 20 minutes before using to avoid any incorrect measurements.

### 4. Care and Cleaning:

- Wipe the tip and probe with an alcohol swab or cotton swab moistened with 70% isopropyl alcohol before & after each use. \* After cleaning, **wait at least 2 minutes** before taking a measurement for the unit to readjust to room temperature.
- Use only a soft dry cloth to clean the body of the thermometer (if necessary).
- Never use an abrasive cleanser or submerge the thermometer in water or other liquids.**
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock. Store at room temperature.

### 5. Troubleshooting and Special Indications:

The thermometer has been designed to display feedback/warnings to ensure proper usage and accurate temperature measurement. When an error or indication appears, one "beep" signal will be heard once every second for 5 seconds and then the thermometer will turn off automatically. In the event of a malfunction or incorrect temperature measurement, the following warnings will be displayed:

**Indication:** The measured temperature is below 95°F (35°C) Display will read LO.

**Instruction:** Turn the unit OFF to wait at least 2 minutes and then ON again. Retake temperature using proper technique (see section 3).



**Indication:** The measured temperature is above 107.6°F (42°C). Display will read HI.

**Instruction:** Turn the unit OFF to wait at least 2 minutes and then ON again. To verify the reading, retake temperature using proper technique (see section 3).



**\*\* WARNING - A high fever condition requires seeking immediate medical attention \*\***  
**HIGH FEVERS ARE DANGEROUS**

5

6

**Indication 1:** The thermometer is too cold or too hot to operate.

**Instruction:** Verify room temperature is within product range 60.8°F to 104.0°F (16°C to 40°C). Retake temperature using proper technique (see section 3).



**Indication 2:** Temperature did not register because of poor contact, patient movement or poor placement.

**Instruction:** Turn the unit OFF, wait two minutes, turn it ON again and retake temperature using proper technique (see section 3).



**Indication 3:** Unit malfunctioned.

**Instruction:** Do not use the thermometer – contact distributor for instructions (see section 7).



**Low Batteries Indication:** Battery icon is on continuously.

**Instruction:** The batteries have enough remaining life for approximately 30 more measurements.



**Drained Batteries Indication:** Displays OFF with battery icon flashing when thermometer is turned on and the device automatically turns itself OFF after 15 seconds.

**Instruction:** The batteries are drained - replace batteries (see section 2).



### 6. Technical Specifications:

Feature	Performance / Data
Measurement time	6–10 seconds
Measurement locations	Temporal artery area of the forehead
Measurement range	95.5°F to 107.6°F (35°C to 42°C)
Operation environment	60.8°F to 104.0°F (16°C to 40°C) Humidity: 15-95% (non condensing)
Storage environment	-4°F to 122°F (-20° C to 50° C), Humidity: 15-95% (non condensing)
Measurement readout	Fahrenheit or Celsius
Accuracy	Complies with ASTM E 1112-00 standard requirements
Display	TN LCD 1" x 1" (27.0mm x 27.0mm)
Batteries	2 AAA 1.5volt batteries
Battery life	Minimum 1000 full duty cycles over 24 month period
Weight	2.24oz (56.2gr) including batteries
Dimensions	3.86" x 1.79" x 1.17" (9.9 cm x 4.6 cm x 3.0 cm)
Memory	Nine sets
Auto shut off	After 60 seconds
Case material	Food grade ABS plastic
Probe material	Stainless steel and food grade ABS plastic
Warranty	1 year

### 7. Warranty and Service Information:

This thermometer has a One Year Limited Warranty against manufacturers defect under normal use. Following the directions closely will ensure years of dependable operation.

If the thermometer does not function properly, first check the batteries (see Battery Replacement instructions – section 2). Replace if necessary.

If the thermometer does not function properly, please write BESTMED, LLC at 331 Corporate Circle, Ste E, Golden, CO 80401 or you may call customer service at 1-877-299-6700. Our representative will provide further instruction on how to correct the trouble or will ask you to return it for repair or replacement.

\* Internally powered device \* Type - BF Applied part.

\* Degree of protection against ingress of water: Ordinary

⚠ Read the Instructions For use 🧑‍🔧 Applied part type BF equipment

Distributed by: BESTMED, LLC" Golden, CO 80401

Manufactured by: K-jump Health Co., Ltd.

Made in China

7

8

## Instrucciones de uso **ReliOn** Termómetro digital para la sien

Gracias por comprar el ReliOn® termómetro digital para la sien uso. El termómetro le permite medir la temperatura con precisión en aproximadamente 6 a 10 segundos, siguiendo unos sencillos pasos.

### Índice:

#### INICIO RÁPIDO

- Sección 1 Sobre la medición de la temperatura corporal  
Sección 2 Instalación y reemplazo de las pilas  
Sección 3 Pautas de uso  
Sección 4 Cuidado y limpieza  
Sección 5 Resolución de problemas e indicaciones especiales  
Sección 6 Información técnica  
Sección 7 Información sobre la garantía y reparaciones


**¡IMPORTANTE! Lea el manual del usuario antes de usar el termómetro.**

#### INICIO RÁPIDO

1. Ponga las pilas en el termómetro. Asegúrese de usar la polaridad correcta (consulte la sección 2).
2. Presione y suelte el botón azul de ENCENDIDO/APAGADO. La unidad emitirá un pitido. Espere hasta que emita un segundo pitido y aparezca °F en la pantalla (consulte la sección 3).
3. Coloque la sonda del termómetro contra la piel de la sien y manténgala firmemente mientras espera varios segundos hasta que el dispositivo pite una vez más (consulte la sección 3).
4. Lea la temperatura en la pantalla (consulte la sección 3).

#### Advertencias generales:

1. El lugar de medición es la sien, cerca de la arteria temporal, entre la cavidad del ojo y la línea del cabello.
2. No coloque el termómetro sobre tejido cicatrizado afectado por un trastorno cutáneo, heridas o abrasiones abiertas ni a pacientes con traumatismo.
3. Consulte a su médico cuando use terapias farmacológicas que pueden elevar la temperatura de la piel en la frente; esto puede causar una lectura incorrecta.
4. No coloque el termómetro sobre piel que esté expuesta a luz solar directa, al calor de una chimenea, al flujo del aire acondicionado ni a terapia con compresas frías o calientes.
5. Mantenga el termómetro fuera del alcance de niños sin supervisión.
6. No deje caer el termómetro ni lo exponga a golpes fuertes. La unidad no es a prueba de golpes.

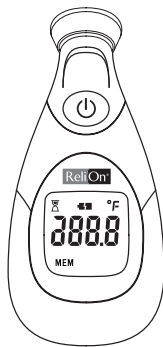

7. No sumerja el termómetro en agua ni en ningún otro líquido. La unidad no es impermeable.
8. Para obtener una medición precisa, espere al menos dos minutos entre mediciones consecutivas para que la unidad se reajuste a la temperatura ambiente.
9. El uso de este dispositivo no es apropiado en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire o con oxígeno u óxido nítrico.
10. No guarde la unidad bajo luz solar directa, a altas temperaturas, en condiciones de alta humedad o polvo. Se puede deteriorar el funcionamiento de la unidad.
11. Deje de usar el termómetro si funciona de manera irregular o si la pantalla no funciona bien.
12. Limpie la sonda del termómetro antes de guardarlo. (Vea sección 4, el Cuidado & Limpiando)
13. No intente desarmar la unidad excepto para cambiar las pilas.
14. Si se ha guardado el termómetro a temperaturas bajo cero, deje que éste vuelva de manera natural a la temperatura ambiente antes de usarlo.
15. El funcionamiento del dispositivo puede verse deteriorado si se usa o se guarda fuera de los rangos de temperatura y humedad mencionados o si la temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente (de la habitación).

#### 1. Sobre la medición de la temperatura corporal:

##### ¿Cómo funciona el termómetro?

El termómetro digital para la sien ReliOn® mide con precisión el calor corporal utilizando tecnología de punta, rápida y precisa. El sensor **A** detecta rápidamente el flujo de calor que va de los vasos sanguíneos **B** a la superficie de la piel **C** y convierte la medición en temperatura corporal.



##### Información sobre la temperatura corporal

##### ¿Cuál es la temperatura corporal "normal"?

La temperatura corporal "normal" varía de una persona a otra y cambia según la hora del día y la ubicación del cuerpo. Los baños fríos o calientes, el ejercicio físico, fumar y beber, las bebidas calientes o frías pueden cambiar la temperatura corporal un grado o más.

La siguiente tabla muestra los rangos de temperatura:

	¿Qué es fiebre?	Rangos promedio de temperatura normales
<b>La frente</b>	Más de 37.8°C / 100°F	36.1°C - 37.8°C / 97.0°F - 100.0°F
<b>Rectal*</b>	Más de 38°C / 100.4°F	36.3°C - 38°C / 97.3°F - 100.4°F
<b>Oral (boca)*</b>	Más de 37.8°C / 100.0°F	36.1°C - 37.8°C / 97.0°F - 100.0°F
<b>Axila (sobaco)*</b>	Más de 37.2°C / 99.0°F	35.2°C - 37.2°C / 95.4°F - 99.0°F

\*Definiciones de fiebre según la American Medical Association (Asociación médica americana)

1

2

El termómetro está diseñado para medir con precisión la temperatura en la frente, cerca de la arteria temporal, entre la cavidad del ojo y la línea del cabello. Es importante saber que las características térmicas de cada parte del cuerpo (sien, axila, boca o recto) son únicas. La variación de temperatura en las diferentes partes del cuerpo se debe al propio cuerpo humano, no al termómetro. Las lecturas del termómetro equivalen a las mediciones orales.

#### ¡IMPORTANTE:

- " Se recomienda medir la temperatura corporal de cada individuo cuando se está sano para establecer una temperatura "normal".
- " Debido a la fisiología corporal única de cada persona, se recomienda tomar la temperatura de dicha persona en el mismo punto en la sien cuando se comparen mediciones.

#### 2. Instalación y reemplazo de las pilas:

El termómetro usa 2 pilas estándar AAA de 1.5v. Para instalarlas o cambiarlas:

1. Quite la cubierta de las pilas deslizándola para sacarla de su lugar.
2. Coloque bien las pilas en su lugar y asegúrese de usar la polaridad correcta.
3. Deslice la cubierta de las pilas para volverla a colocar.

**¡IMPORTANTE:** Se recomienda quitar las pilas del termómetro cuando no se vaya a usar en un largo periodo de tiempo.

**ADVERTENCIA:** No arroje las pilas al fuego, las recargue, las coloque al revés, las desarme, ni las mezcle con pilas usadas o de otro tipo; pueden explotar o tener fugas y provocar lesiones. Las pilas que haya que desechar deben depositarse únicamente en lugares de reciclaje de pilas.

#### 3. Pautas de uso:

- a. Use este termómetro sobre piel limpia y seca. Limpie el sudor antes de usarlo.
- b. Asegúrese de que ni el termómetro ni el paciente se mueven mientras se está tomando la temperatura.
- c. La colocación correcta y el buen contacto con el cuerpo aseguran que las lecturas sean confiables.
- d. No intente tomar una medición hasta que se oigan dos pitidos.

#### Fijación de la escala de funcionamiento en °F ó °C

El ajuste predeterminado del dispositivo es Fahrenheit (°F); sin embargo, en cualquier momento, se puede cambiar la escala. Para cambiar a Celsius (°C) o de nuevo a °F, presione el botón de encendido dentro de los primeros 3 minutos de haber encendido la unidad.

#### Uso del termómetro

1. Presione y suelte el botón azul de encendido . Oirá un pitido. Aparecerán en pantalla todos los segmentos. (1) Un "pitido"
2. El resultado de la medición de temperatura anterior aparecerá durante 2 segundos\*. (2)
3. Espere a que desaparezca el ícono del reloj de arena; después se oirán dos pitidos que indican que ahora el termómetro está "listo para usarse". (3)
4. Realice una medición de acuerdo a las siguientes pautas: (4) Dos "pitidos"

#### Medición de la temperatura:

- a. Asegúrese de que el área de la sien está seca y limpia.
- b. Retire el cabello del área de la sien.
- c. Coloque la sonda del termómetro en el centro del área de la sien entre la cavidad del ojo y la línea del cabello. Con cuidado, presiónelo contra la sien para asegurarse de que se mantiene un buen contacto con la piel. (f) Un "pitido" largo
- d. No mueva el dispositivo y mantenga quieto al paciente mientras se realiza la medición. (f) Un "pitido" largo
- e. La medición comienza automáticamente en cuanto se coloca el termómetro. Aparece un círculo en movimiento que indica que la medición se está llevando a cabo con éxito. (g) Dos "pitidos"
- f. En 6 a 10 segundos, aparecerá una lectura de temperatura. Se oirá un pitido largo que indica que ha terminado la medición. (g) Dos "pitidos"
- g. Espere a que desaparezca el ícono del reloj de arena; después se oirán dos pitidos que indican que ahora el termómetro está "listo para tomar mediciones nuevamente". (g) Dos "pitidos"
- h. Presione y suelte el botón azul de encendido para apagar el termómetro. (h)
- i. Si desea obtener la máxima precisión, espere dos minutos después de apagar el termómetro y vuelva a comenzar en el paso 1 de "Uso del termómetro".


3

4

### Modo de memoria


#### Recuperación de la memoria:

- Si la unidad está encendida, primero apáguela.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos hasta que aparezca la última temperatura registrada.
- Presionar de manera repetida el botón de encendido le llevará a cada temperatura registrada en la memoria.
- Después de soltar el botón de encendido, la unidad regresará a la pantalla con todos los segmentos.
- Espera a que desaparezca el ícono del reloj de arena; después se oirán dos pitidos que indican que ahora el termómetro está "listo para usarse".

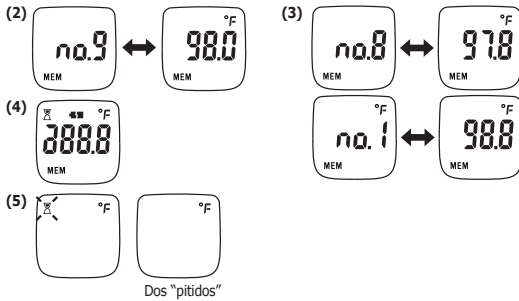

#### Borrado de las memorias:

- Repita los dos primeros pasos de "Recuperación de la memoria".
- Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos hasta que aparezca "dEL".
- (a) Para borrar: Presione y suelte el botón de encendido para borrar todos los registros de la unidad. Se oirá un pitido.  
(b) Para cancelar: NO presione el botón de encendido durante 10 segundos, la unidad regresará a la pantalla con todos los segmentos. Espere a que desaparezca el ícono del reloj de arena; después se oirán dos pitidos que indican que ahora el termómetro está "listo para usarse".

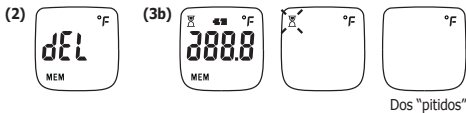

5

### IMPORTANTE:

- Limpie el termómetro después de cada uso (consulte la sección 4).
- Para obtener una medición precisa, espere al menos dos minutos entre mediciones consecutivas para que la unidad se reajuste a la temperatura ambiente.**
- Si no se apaga el termómetro, éste se apagará automáticamente después de 1 minuto.
- Una vez que el termómetro esté "listo para usarse", se apagará automáticamente después de un minuto si no ha establecido o no se ha mantenido buen contacto con la piel del paciente.
- Ya que el termómetro es un dispositivo muy sensible, para evitar mediciones incorrectas, el paciente y el termómetro deben estar a la misma temperatura ambiente (aproximadamente 16 a 40°C / 60.8 a 104.0°F) durante al menos 20 minutos antes de usarlo.

#### 4. Cuidado y limpieza:

- Antes y después de cada uso, limpie la punta y la sonda con un hisopo con alcohol o un hisopo de algodón con alcohol isopropílico al 70%. \* Después de limpiarlo, espere al menos dos minutos antes de tomar una medición para que la unidad se reajuste a la temperatura ambiente.
- Use solamente un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro (si es necesario).
- Nunca use un limpiador abrasivo ni sumerja el termómetro en agua ni en otros líquidos.**
- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa o golpes. Guárdelo a temperatura ambiente.

#### 5. Resolución de problemas e indicaciones especiales:

El termómetro ha sido diseñado para mostrar información y advertencias que aseguren su uso apropiado y la medición precisa de la temperatura. Cuando aparezca un error o una indicación, se oirá un "pitido" cada segundo durante 5 segundos y después el termómetro se apagará automáticamente. En caso de que funcione mal o mida la temperatura de manera incorrecta, aparecerán las siguientes advertencias:

**Indicación:** La temperatura medida es inferior a 35°C (95°F). En la pantalla, aparece LO.



**Instrucción:** APAGUE la unidad, espere al menos 2 minutos y luego ENCIÉNDALA nuevamente. Vuelva a tomar la temperatura siguiendo la técnica apropiada (consulte la sección 3).

**Indicación:** La temperatura medida es superior a 42°C (107.6°F). En la pantalla, aparece HI.



**Instrucción:** APAGUE la unidad, espere al menos 2 minutos y luego ENCIÉNDALA nuevamente. Para verificar la lectura, vuelva a tomar la temperatura siguiendo la técnica apropiada (consulte la sección 3).

**\*\* ADVERTENCIA – Una fiebre alta requiere la búsqueda de atención médica inmediata \*\***  
**LA FIEBRE ALTA ES PELIGROSA**

6

**Indicación 1:** El termómetro está demasiado frío o demasiado caliente para funcionar.

**Instrucción:** Verifique que la temperatura de la habitación esté dentro del rango del producto de 16°C a 40°C (60.8°F a 104°F). Vuelva a tomar la temperatura siguiendo la técnica apropiada (consulte la sección 3).



**Indicación 2:** No se registró la temperatura debido a insuficiente contacto, movimiento del paciente o mala colocación.

**Instrucción:** APAGUE la unidad, espere dos minutos, ENCIÉNDALA de nuevo y vuelva a tomar la temperatura siguiendo la técnica apropiada (consulte la sección 3).



**Indicación 3:** La unidad funcionó mal.

**Instrucción:** No use el termómetro y póngase en contacto con el distribuidor para recibir instrucciones (consulte la sección 7).



**Indicación de poca carga de las pilas:** El ícono de las pilas está encendido continuamente.

**Instrucción:** A las pilas les queda una carga como para aproximadamente 30 mediciones más.



**Indicación de pilas agotadas:** La pantalla indica APAGADO con el ícono de la pila parpadeando cuando se enciende el termómetro y el dispositivo se APAGA automáticamente después de 15 segundos.

**Instrucción:** Las pilas están agotadas; cámbielas (consulte la sección 2).



7

### 6. Especificaciones técnicas:

Característica	Rendimiento / Datos
Tiempo de medición	6–10 segundos
Lugares de medición	Área de la arteria temporal de la frente
Rango de medición	35°C a 42°C (95.5°F a 107.6°F)
Ambiente de funcionamiento	16°C a 40°C (60.8°F a 104°F) Humedad: 15 a 95% (sin condensación)
Ambiente de almacenamiento	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F) Humedad: 15 a 95% (sin condensación)
Lectura de la medición	Fahrenheit o Celsius
Precisión	Cumple los requisitos de la norma ASTM 1112-00
Pantalla	TN LCD 27.0 mm x 27.0 mm (1 pulg. x 1 pulg.)
Pilas	Pilas 2 AAA 1.5 voltios
Duración de las pilas	Mínimo de 1000 ciclos de trabajo completos durante un período de 24 meses
Peso	56.2 g (2.24 oz.) incluyendo las pilas
Dimensiones	9.9 cm x 4.6 cm x 3.0 cm (3.86 pulg. x 1.79 pulg. x 1.17 pulg.)
Memoria	Nueve grupos
Apagado automático	Después de 60 segundos
Material del estuche	Plástico ABS de grado alimentario
Material de la sonda	Acero inoxidable y plástico ABS de grado alimentario
Garantía	1 año

### 7. Información sobre la garantía y reparaciones:

Este termómetro tiene una garantía limitada de un año contra defecto de fabricación bajo condiciones de uso normales. Seguir con precisión las instrucciones asegurará años de funcionamiento confiable.

Si el termómetro no funciona bien, primero revise las pilas (consulte las instrucciones para el Reemplazo de las pilas – sección 2). Cámbielas si es necesario.

Si el termómetro no funciona bien, escriba a BESTMED, LLC en la dirección 331 Corporate Circle, Ste E, Golden, CO 80401 ó llame al servicio de atención al cliente al 1-877-299-6700. Nuestro representante le proporcionará instrucciones adicionales sobre cómo corregir el problema o le pedirá que devuelva el termómetro para repararlo o reemplazarlo.

\* Dispositivo con alimentación interna \* Pieza aplicada tipo BF.

\* Grado de protección contra la entrada de agua: Ordinario



Lea las Instrucciones de uso



Equipo de pieza aplicada tipo BF

Distribuido por: BESTMED, LLC Golden, CO 80401

Fabricado por: K-jump Health Co., Ltd.

Hecho en China

8